



Procédure de connexion du Schiller Defiguard Touch 7 à SMUR-t@b

07/02/2023

Prérequis


Ceci est la procédure de connexion de l'appareil Touch 7 de Schiller à SMUR-t@b.

Les prérequis sont donc une tablette SMUR-t@b et l'appareil Schiller Defiguard Touch 7.




Première connexion de l'appareil Schiller à la
tablette


Sur l'appareil Schiller Defiguard Touch 7

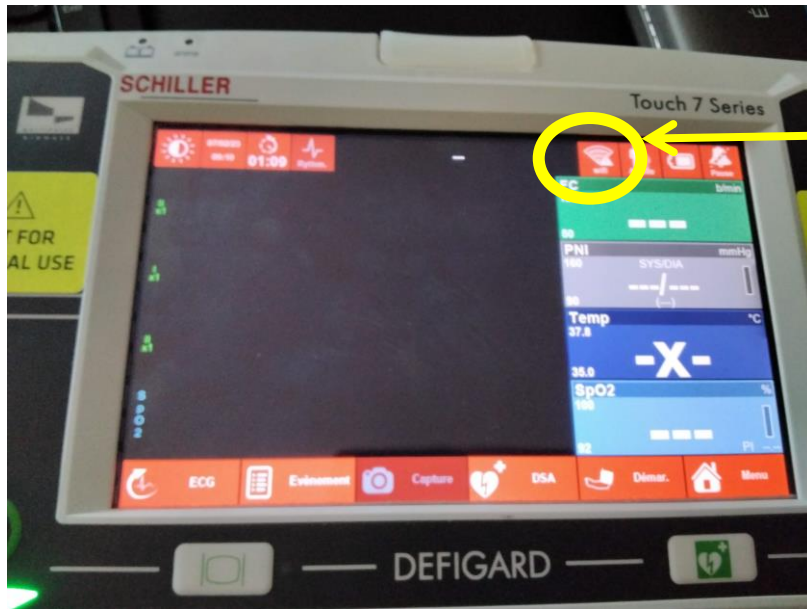


1. Cliquer sur Wifi

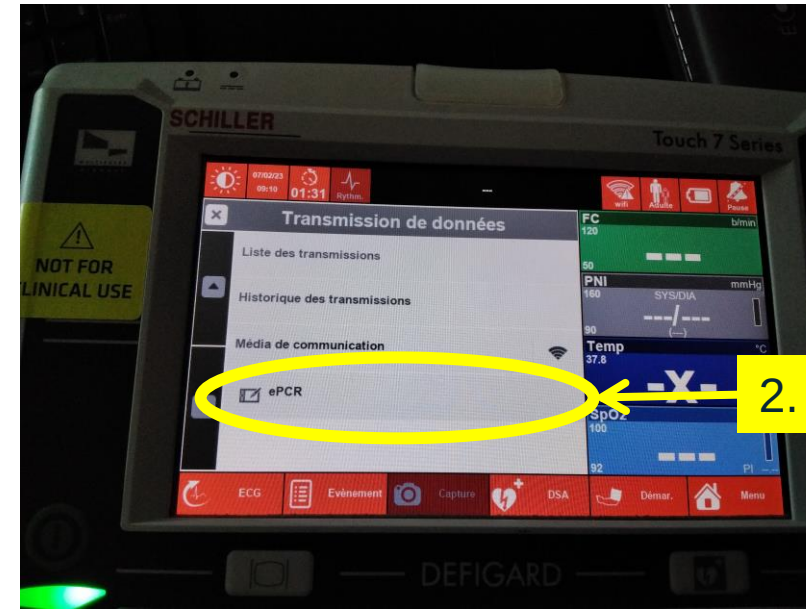

2. Cliquer sur ePCR



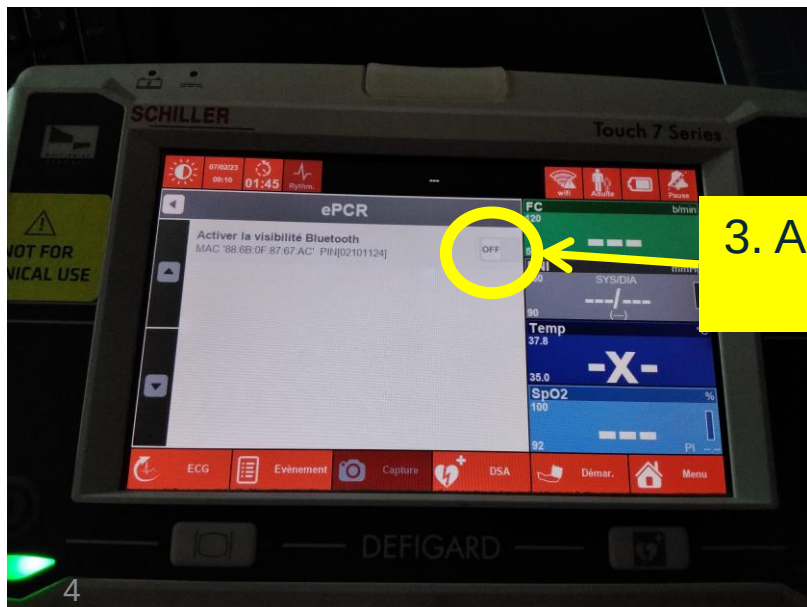


3. Activer la visibilité Bluetooth

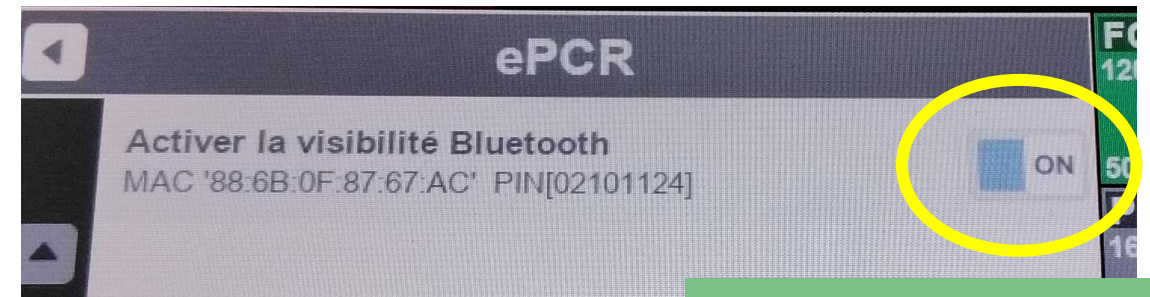




Visibilité Bluetooth
activé

Sur la tablette

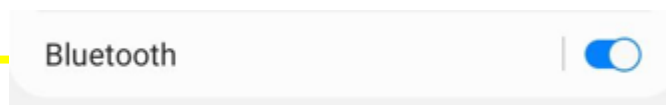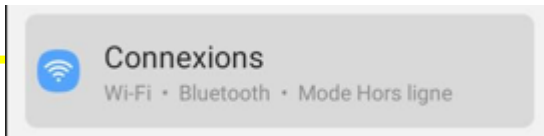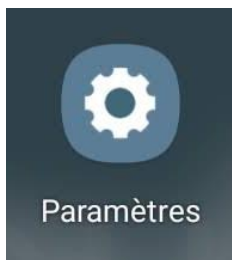


4. Aller dans :
Paramètres > Connexions > Bluetooth

5. Trouver l'appareil dans les appareils disponibles et sélectionner l'appareil

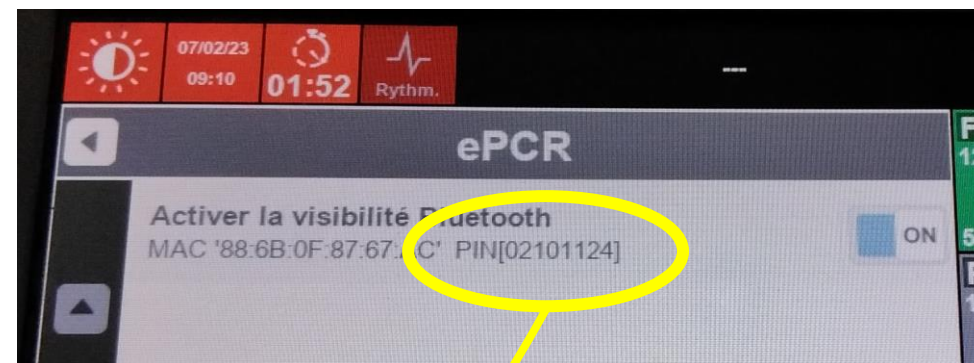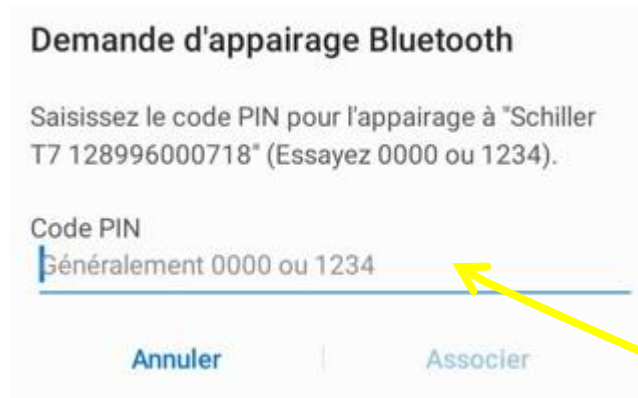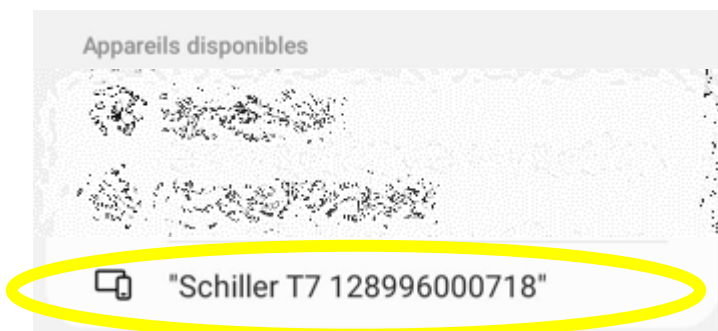



6. Le code PIN est celui affiché sur l'appareil Schiller

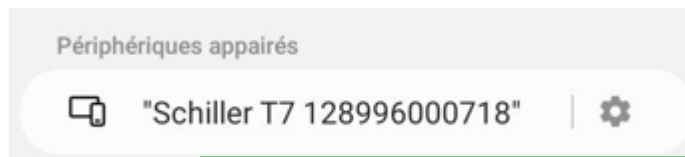

L'appareil est maintenant appairé

Sur l'appareil Touch 7 Schiller




7. Désactiver la visibilité Bluetooth

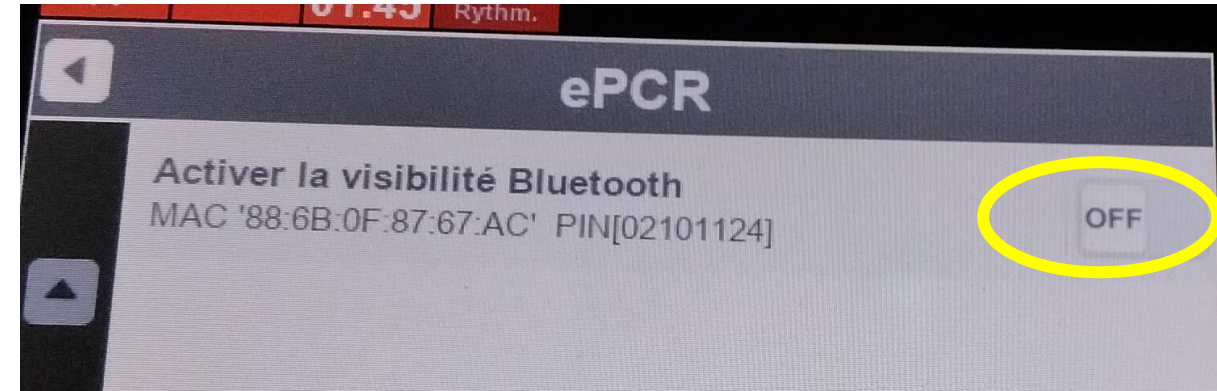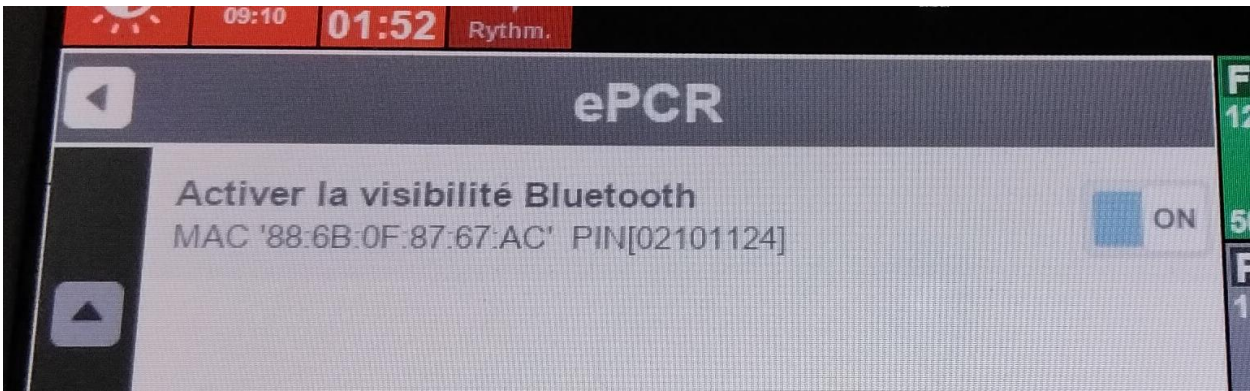

Une fois appairé à la tablette, il n'est plus nécessaire de garder la visibilité Bluetooth, sauf en cas de connexion à une nouvelle tablette

La partie (pages 4 à 7) n'est plus à refaire si l'appareil Schiller a déjà été connecté à la tablette

Connexion sur SMUR-t@b

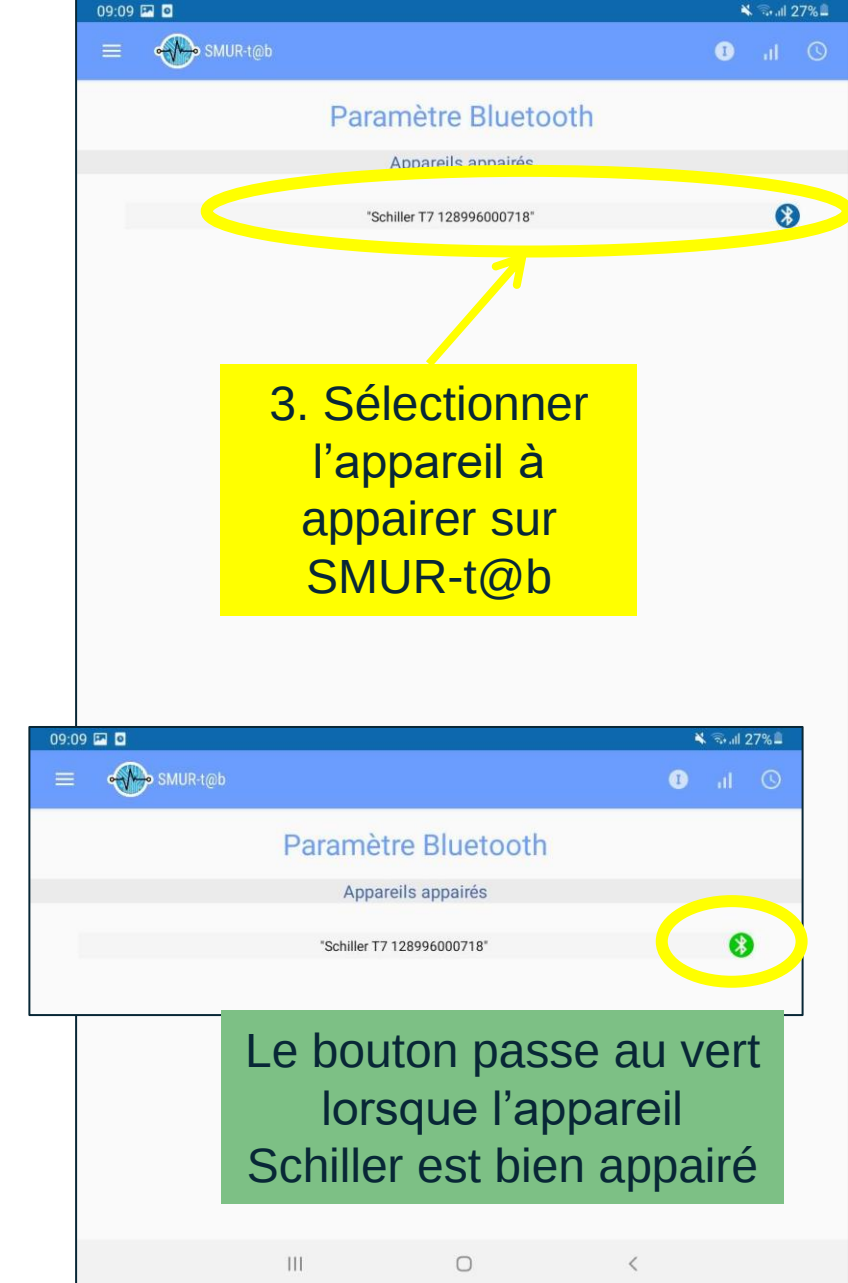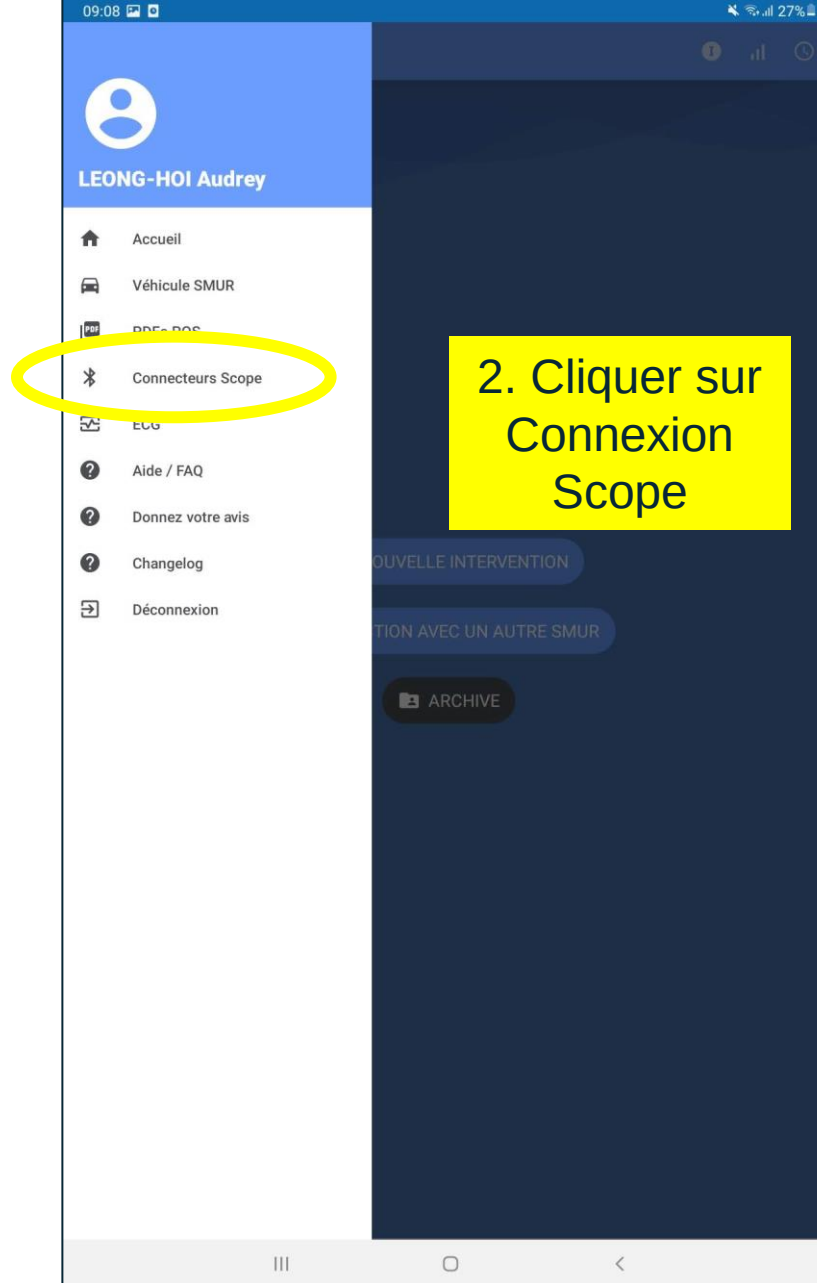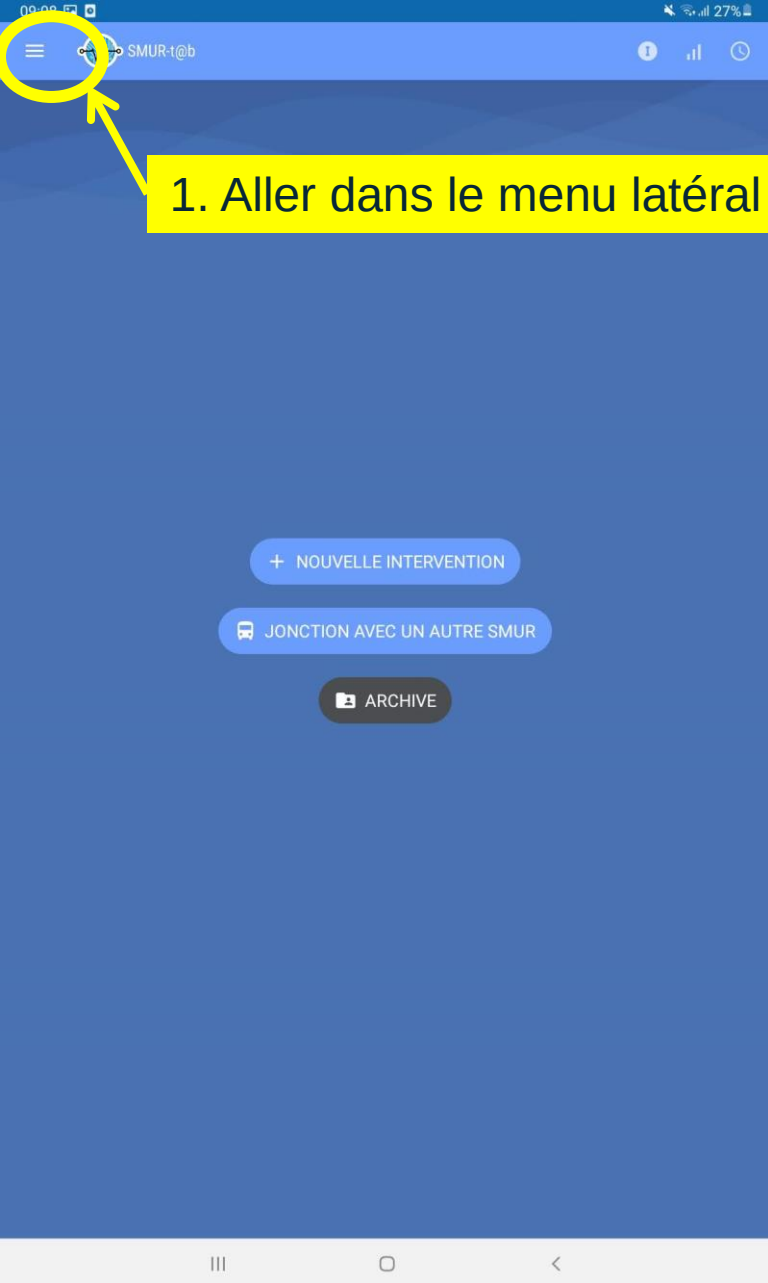

Récupération des constantes


Attention pour récupérer les ECG, une étape préalable est nécessaire sur l'appareil Schiller (cf. pages 10-11)

The screenshot shows the SMUR-t@b mobile application interface. At the top, the status bar displays the time 09:11 and battery level 26%. The app header includes a menu icon, the user identifier SMUR-t@b, and a patient identifier t.t. - F - 99 - An(s). Below the header is a navigation bar with icons for ADMINISTRATIF, ANTECEDENTS, MOTIF, EXAMEN, FICHE PROFIL, SURVEILLANCE, TRAITEMENTS ET ACTES, EVOLUTION DIAGNOSTIC, and TRANSPORT. The SURVEILLANCE tab is active, and within it, the SCOPE sub-tab is highlighted with a yellow circle. A yellow arrow points from this circle to a text box. Below the navigation bar, there are buttons for TENDANCES, SCOPE, and ECG. The main content area displays various vital signs: Heure de la surveillance (12h 54min), Fréquence cardiaque (bpm) (89), Tension PAS (mmHg) (0) and Tension PAD (mmHg) (0), Tension PAM (mmHg) (0), Zone prise de tension SpO2(%) (Gauche/Droite) (97), Débit O2 L/min, FR (/min) (0), ETCO2 (mmHg) (0), Glycémie, and Température (°C). At the bottom, there is a section for Echelle de la douleur.


4. Dans l'onglet Surveillance, cliquer sur Scope

Les constantes sont récupérées

Récupération des ECG

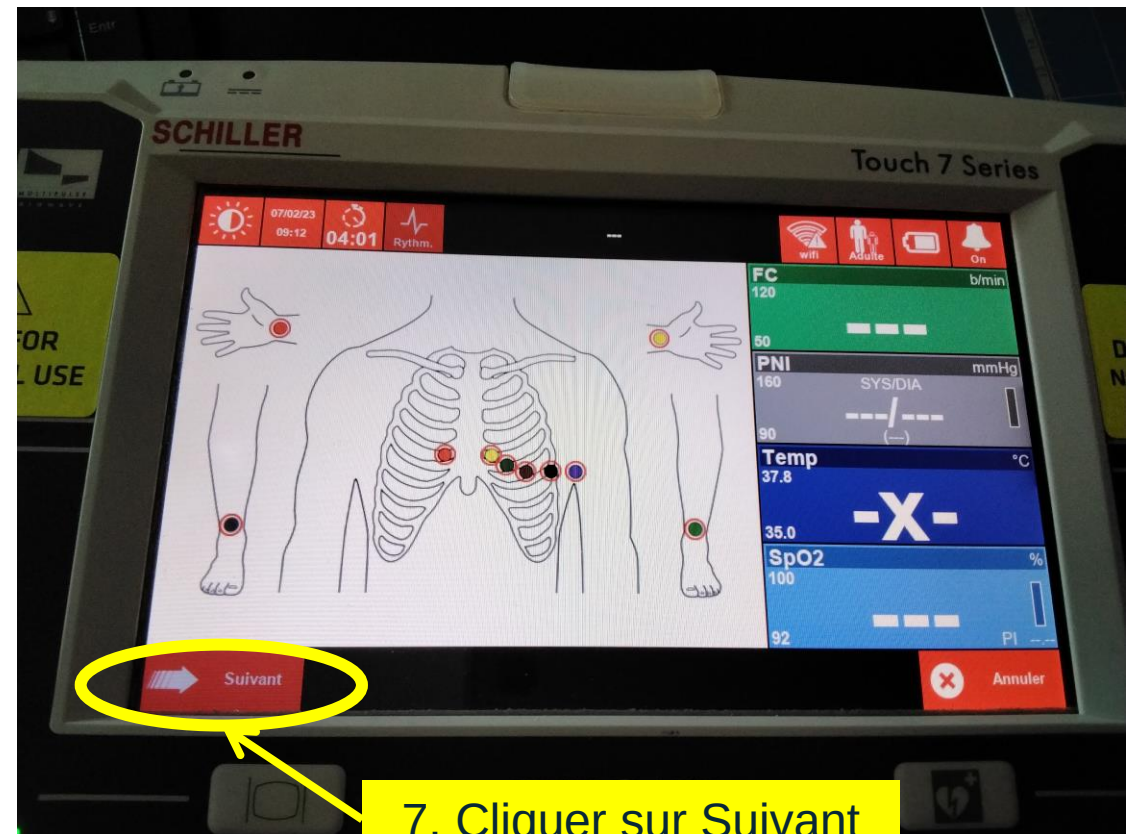



L'appareil Schiller génère un PDF de l'ECG en cours

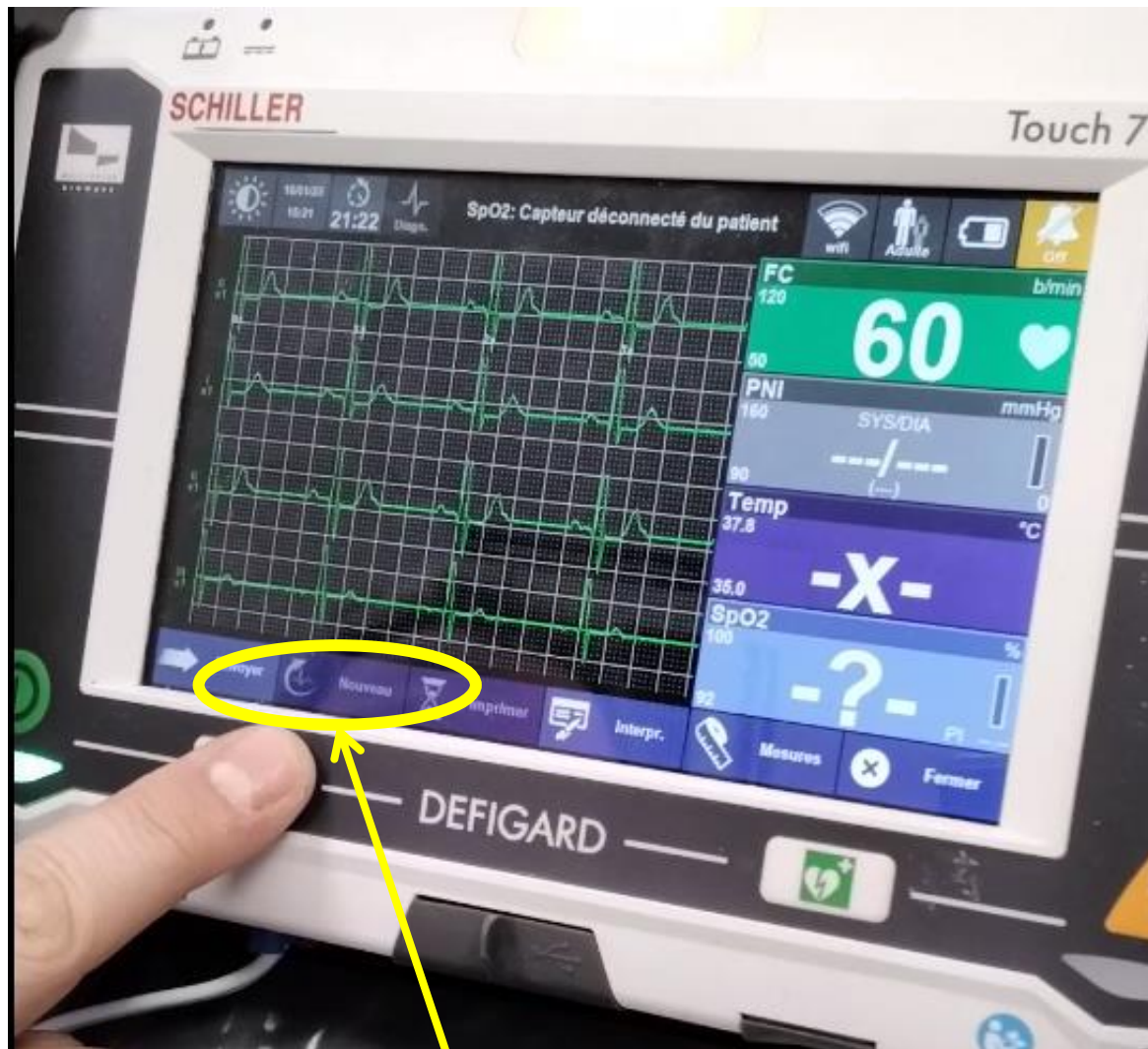

8. ATTENDRE que le bouton
« Nouveau » ne soit plus grisé
(étape importante !)



Le bouton « Nouveau » n'est plus grisé

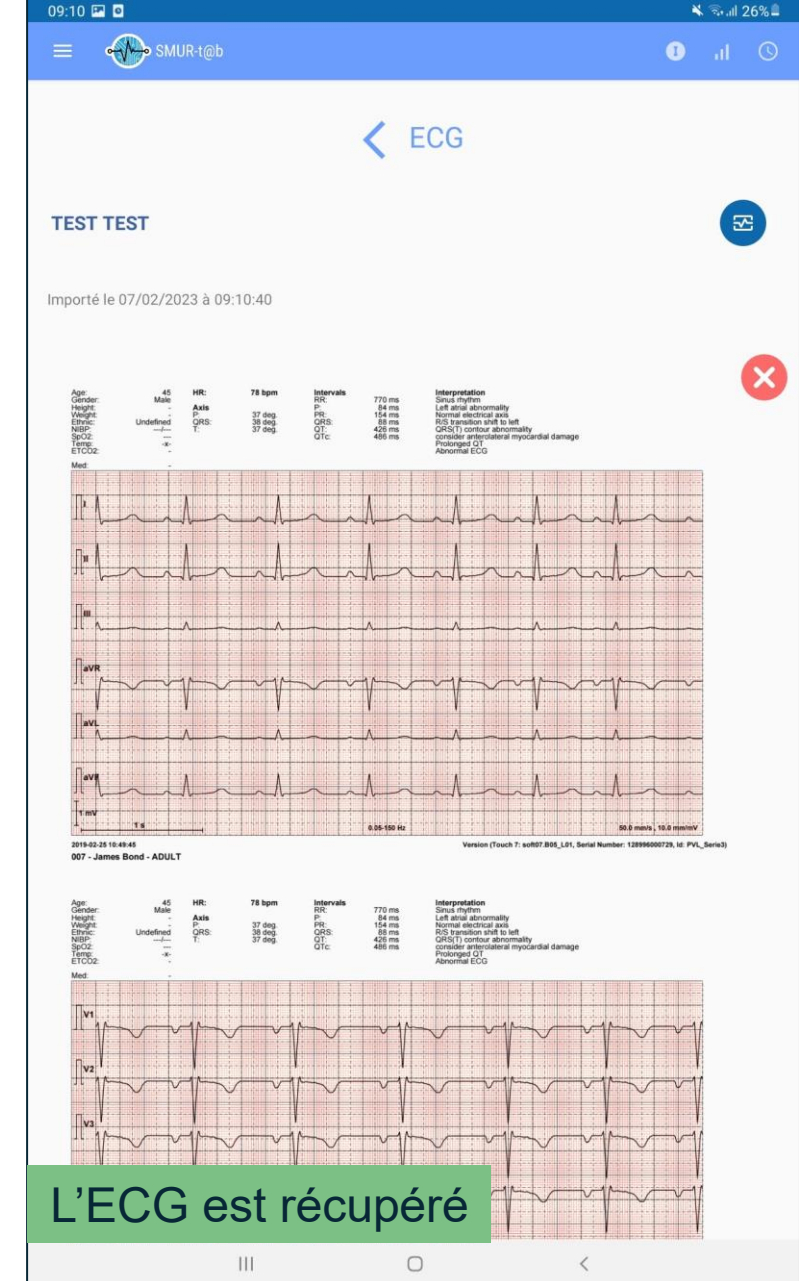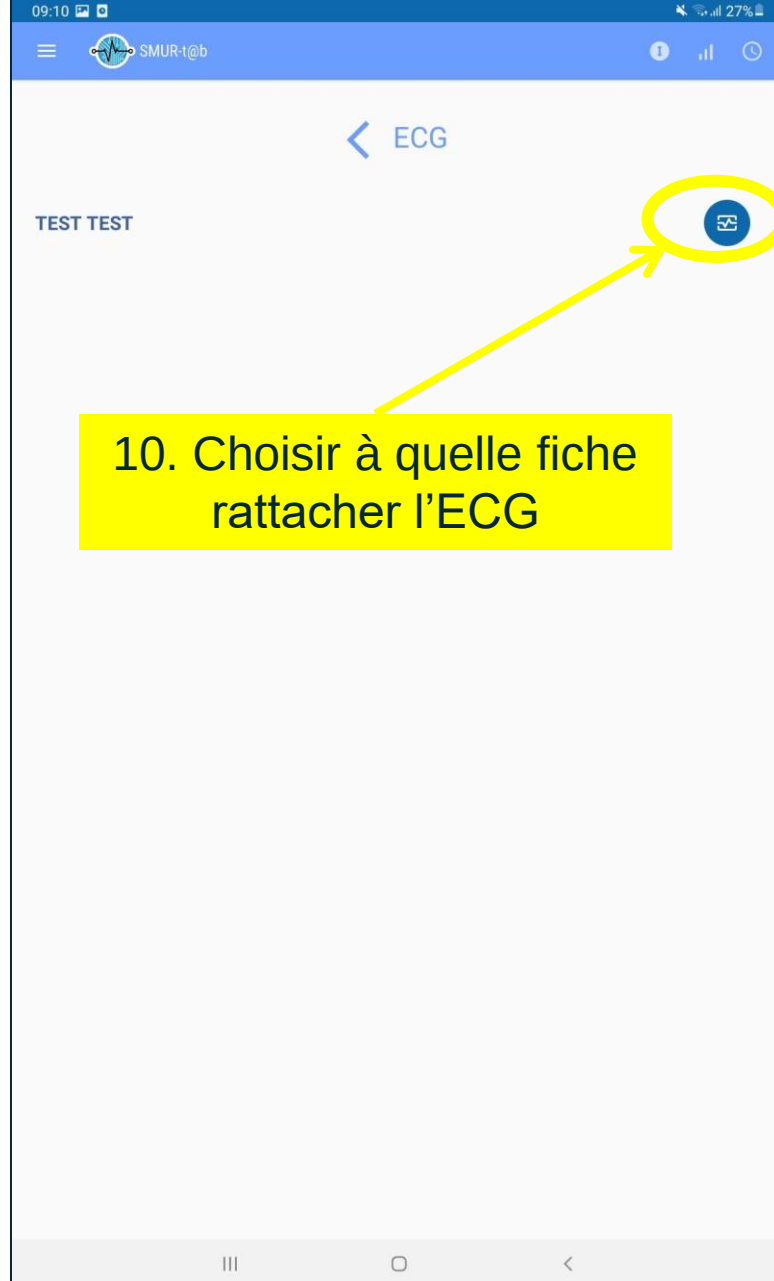

Merci pour votre attention !

Siège et agence de Nancy

📍 6 allée de Longchamp
Technopôle de Nancy-Brabois
54600 Villers-lès-Nancy

Agence de Strasbourg

📍 2 rue Adolphe Seyboth
67000 Strasbourg

Agence de Reims

📍 13 rue André Pingat
51100 Reims

☎ Un numéro unique pour nous joindre **03 83 97 13 70**



www.pulsy.fr



SMUR-t@b



Est-RESCUE

